

Mellom tær

Eksempel på bruksområder:

- Ved sår mellom tær



Mepilex 10x10 cm



Tåttupp

Eksempel på bruksområder:

- Polstring av tåttupper ved tåskader
- Sår på tærne



Mepilex 10x10 cm



Fingre og tær

Eksempel på bruksområder:

- Ulike typer fingerskader
- Samme type klipp kan brukes til sår på tåttupper



Mepilex 10x10 cm



Hånd

Eksempel på bruksområder:

- Ved håndkontrakturer
- Ved håndskader og håndoperasjoner kan Mepilex 10x20 cm klippes på lignende måte



Mepilex 10x10 cm eller 10x20 cm



Albue

Eksempel på bruksområder:

- Polstring
- Sår på albue



Mepilex 10x10 cm




Armhule

Eksempel på bruksområder:

- Sår i armhule
- Andre væskende sår



Mepilex 20x20 cm

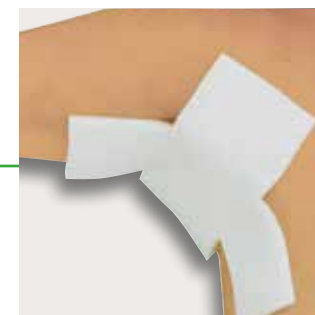

Øre

Eksempel på bruksområder:

- Polstring
- Ved sår rundt øret



Mepilex 10x10 cm




Rundt slanger og katetre

Eksempel på bruksområder:

- Ved PEG, suprapubiskateter og dren
- Kan også brukes rundt pinnene på eksterne fiksasjoner
- Som beskyttelse for sår hud under stomi-plate



Mepilex 10x10 cm

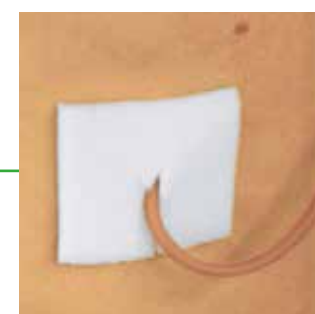

Mepilex er en myk absorberende bandasje med Safetac teknologi som egner seg for overfladiske væskende sår, for eksempel ben- og fotsår, trykksår, smertefulle sår og sår med skjør omkringliggende hud. Det myke silikonlaget forhindrer vevskade på såret og omkringliggende hud, og pasienten opplever mindre smerte.

De eksemplene som vises ovenfor kan klippes med vanlig saks, og kan fikseres med fikseringstape eller forbindelse (for eksempel Tubifast™ 2-Way Stretch™). Denne appliseringsguiden kan også benyttes ved tilpasning av andre klippbare bandasjer. Se siste side.



Mepilex sortiment

Art. nr	Strl. i cm	Antall i eske	Antall i kartong
294015	5 x 5	5	40
294100	10 x 10	5	70
294200	10 x 10	5	45
294300	15 x 15	5	25
294400	20 x 20	5	20
294500	20 x 50	2	12

Mepilex Heel sortiment

Art. nr	Strl. i cm	Antall i eske	Antall i kartong
288100	13 x 20	5	25
288300	15 x 22	5	30

Apotekspakning

Art. nr	Strl. i cm	Antall i eske	Antall i kartong
294170	10 x 10	2	-