

Mepilex® Border

Det effektiva absorberande allt-i-ett skumförbandet


- Minskar smärta och vävnadsskada vid förbandsbyte^{1,2}
- Högeffektiv vätskehantering
- Skonsam men säker vidhäftning
- Duschbar

Baksidesfilm av polyuretan

- Andningsbar
- Duschbar
- Virus- och bakteriebarriär*

Safetac® yta

- Minskar smärta och vävnadsskada före, under och efter förbandsbyte¹
- Vidhäftar inte i det fuktiga såret utan endast på den torra huden
- Sluter sig kring sårkanterna och minskar risken för maceration³

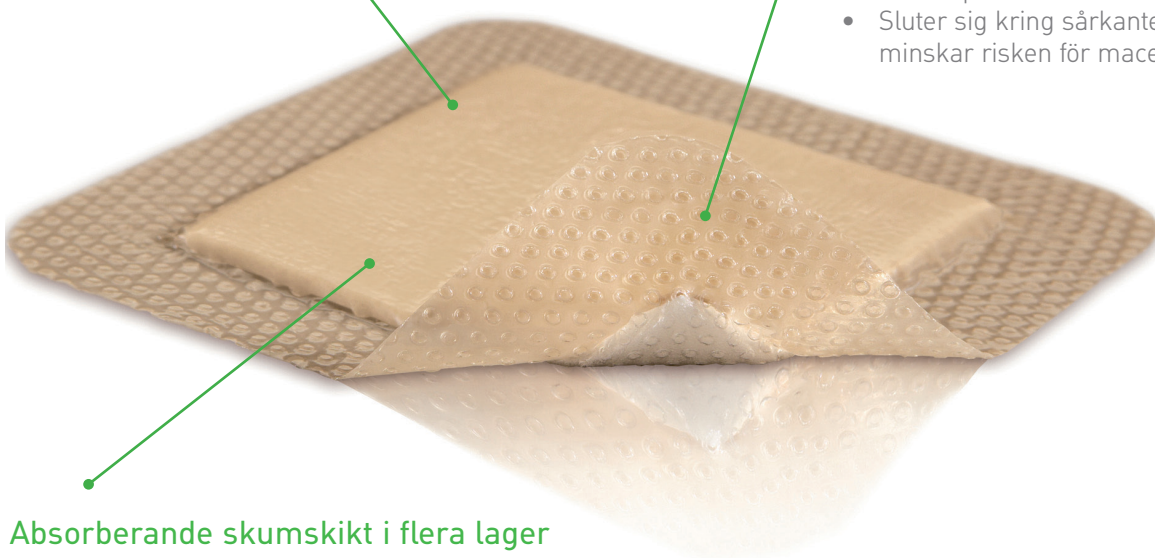

Absorberande skumskikt i flera lager


- Polyuretanskum som snabbt absorberar sårvätska
- Fiberlager med superabsorbenter för maximal retention
- Nonwoven spridningsskikt för att optimera absorptionen och förhindra läckage

* mikrober större än 25 nm


Safetac® teknologi. Mindre smärta. Mindre vävnadsskada.

Safetac är en patenterad vidhäftningsteknologi som är skonsam vid förbandsbyte och minskar vävnadsskada i såret och på den omkringliggande huden. Detta minskar smärtan hos patienten.

För mer information www.safetac.com

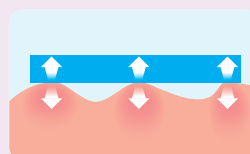


Traditionell vidhäftning fäster endast på hudens översta ytskikt och måste därför vidhäfta aggressivt för att sitta på plats

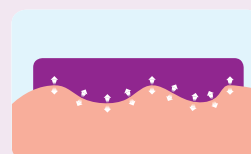


Safetac formar sig efter hudens ojämnheter och sluter sig kring sårkanterna


Så här används Mepilex® Border

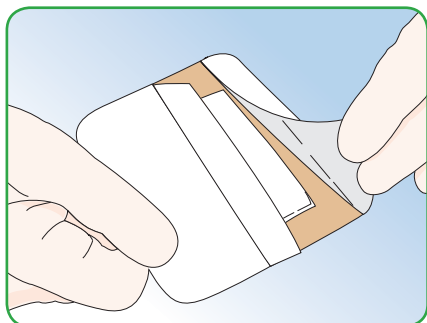

Rengör sårområdet.
Ta bort skyddsfilm.

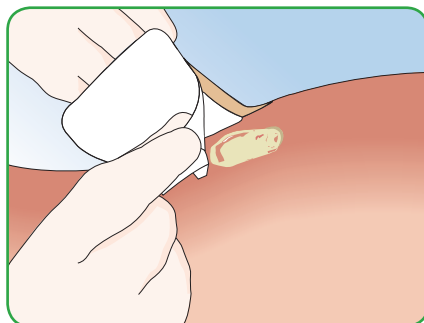

Applicera den klabbiga sidan mot såret.
Sträck inte förbandet.

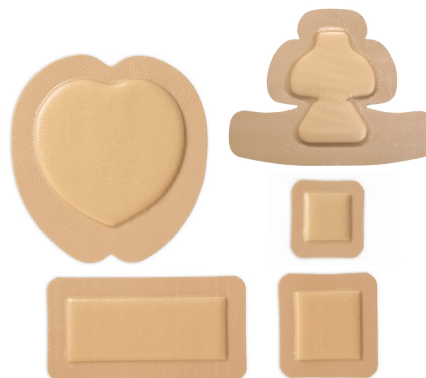

Så här fungerar Mepilex Border

Mepilex Border är ett självhäftande och duschbart allt-i-ett skumförband med superabsorbenter. Förbandet absorberar sårsekret effektivt och bibehåller en fuktig sårmiljö. Safetac sluter sig kring sårkanterna, vilket förhindrar att sårsekret läcker ut på den omkringliggande huden och därmed minskar risken för maceration. Safetac är skonsamt vid förbandsbyte och minskar vävnadsskada i såret samt på den omkringliggande huden. Detta minskar smärtan hos patienten.

Fördelar med Mepilex Border

- Minskar smärta och vävnadsskada vid förbandsbyte
- Självfixerande, ingen annan fixering krävs
- Duschbar
- Högeffektiv absorption
- Kan användas under kompression
- Skonsam vidhäftning och behagligt att bära
- Kan sitta kvar i flera dagar beroende på sårets tillstånd
- Förbandet kan justeras och återappliceras utan att tappa vidhäftningsförmågan
- Låg risk för hudirritation och allergi

Användningsområden

Mepilex Border kan användas på ett stort antal vätskande sår såsom trycksår, ben- och fotsår, traumatiska sår t. ex. hudflikar, kirurgiska sår.

Notera

Vid kliniska tecken på infektion kan man fortsätta behandlingen med Mepilex Border om lämplig infektionsbehandling inleds.

Mepilex Border sortiment (levereras sterila, enstycksförpackade)

	Art nr	Storlek cm	Avd fp	Trp fp
Mepilex Border	295200	7,5 x 7,5	5	70
	295300	10 x 10	5	50
	295400	15 x 15	5	50
	295600	15 x 20	5	50
	295800	10 x 20	5	25
	295850	10 x 25	5	35
	295900	10 x 30	5	25
Mepilex Border Sacrum	282500	15 x 15	5	50
	282000	18 x 18	5	40
	282400	23 x 23	5	25
Mepilex Border Heel	283250	18,5 x 24	5	40

Mer information på www.molnlycke.com

Mölnlycke Health Care AB
Box 13080
402 52 Göteborg
031-722 30 00
www.molnlycke.com

The Mölnlycke Health Care name and logo, Safetac® and Mepilex® are registered trademarks of Mölnlycke Health Care AB.

