

Mepilex[®] Border


Det effektiva absorberande allt-i-ett skumförbandet

Absorberande skumskikt i flera lager

- Polyuretanskum som snabbt absorberar sårvätska
- Fiberlager med superabsorbenter för maximal retention
- Nonwoven spridningsskikt för att optimera absorptionen och förhindra läckage

Baksidesfilm av polyuretan

- Andningsbar
- Duschbar
- Virus- och bakteriebarriär*

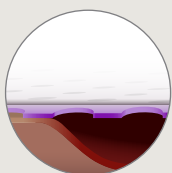

Safetac[®] teknologi

Safetac är en patenterad vidhäftningsteknologi som är skonsam vid förbandsbyte och minskar vävnadsskada i såret och på den omkringliggande huden. Detta minskar smärtan hos patienten.

Safetac[®] yta

- Minskar smärta och vävnadsskada före, under och efter förbandsbyte¹
- Vidhäftar inte i det fuktiga såret utan endast på den torra huden
- Sluter sig kring sårkanterna och minskar risken för maceration³




* mikrober större än 25 nm

- Minskar smärta och vävnadsskada vid förbandsbyte^{1,2}
- Högeffektiv vätskehantering
- Skonsam men säker vidhäftning
- Duschbar


Mepilex[®] Border


Mölnlycke[®]

Så här används Mepilex® Border

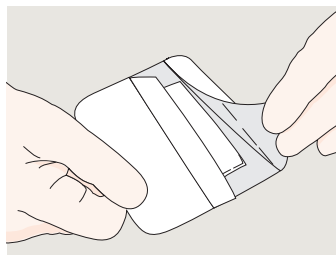

Rengör sårområdet.
Ta bort skyddsfilm.

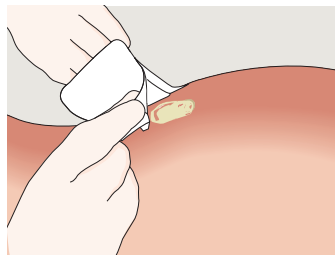

Applicera den klabbiga sidan mot såret.
Sträck inte förbandet.



Mepilex Border Sacrum



Mepilex Border Heel

Så här fungerar Mepilex Border

Mepilex Border är ett självhäftande och duschbart allt-i-ett skumförband med superabsorbenter. Förbandet absorberar sårsekret effektivt och bibehåller en fuktig sårmiljö. Safetac sluter sig kring sårkanterna, vilket förhindrar att sårsekret läcker ut på den omkringliggande huden och därmed minskar risken för maceration. Safetac är skonsamt vid förbandsbyte och minskar vävnadsskada i såret samt på den omkringliggande huden. Detta minskar smärtan hos patienten.

Fördelar med Mepilex Border

- Minskar smärta och vävnadsskada vid förbandsbyte
- Självfixerande, ingen annan fixering krävs
- Duschbar
- Högeffektiv absorption
- Kan användas under kompression
- Skonsam vidhäftning och behagligt att bära
- Kan sitta kvar i flera dagar beroende på sårets tillstånd
- Förbandet kan justeras och återappliceras utan att tappa vidhäftningsförmågan
- Låg risk för hudirritation och allergi

Användningsområden

Mepilex Border kan användas på ett stort antal vätskande sår såsom trycksår, ben- och fotsår, traumatiska sår t. ex. hudflikar, kirurgiska sår.

Notera

Vid kliniska tecken på infektion kan man fortsätta behandlingen med Mepilex Border om lämplig infektionsbehandling inleds.



Mepilex Border levereras sterila, enstycksförpackade

Art.nr.	Storlek cm	Avd fp	Transp fp
Mepilex Border			
295200	7,5 x 7,5	5	70
295300	10 x 10	5	50
295400	15 x 15	5	50
295600	15 x 20	5	45
295800	10 x 20	5	35
295850	10 x 25	5	35
295900	10 x 30	5	25

Mepilex Border Sacrum levereras sterila, enstycksförpackade

Art.nr.	Storlek cm	Avd fp	Transp fp
282050	16 x 20	5	40
282450	22 x 25	5	30

Mepilex Border Heel levereras sterila, enstycksförpackade

Art.nr.	Storlek cm	Avd fp	Transp fp
282750	22 x 23	6	30

Referanser: **1.** White R. A. A multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK, 2008. **2.** Dykes PJ et al. Effects of adhesive dressings on the stratum corneum of the skin. J Wound Care 2001; 10(2):7-10. Principles of best practice: Minimising pain at wound dressing-related procedures. A consensus document. London: MEP Ltd, 2004. **3.** Dykes PJ. The effect of adhesive dressing edges on cutaneous irritancy and skin barrier function. J Wound Care 2007; 16(3):97-100.

Mer information på www.molnlycke.se

Molnlycke Health Care AB, Box 13080, 402 52 Göteborg, Telefon 031-722 30 00
The Molnlycke Health Care name and logo, Safetac and Mepilex Border are registered trademarks of Molnlycke Health Care AB.

