

Tubifast[®] WITH 2-WAY STRETCH[®] TECHNOLOGY

Elastisk tubebandage

Tubifast[®] med 2-Way Stretch[®] holder bandager sikkert på plads uden risiko for at stramme

Tubefacon – ikke behov for sikkerhedsnåle eller tape

Hurtig og enkel at anvende: Klip den til i den ønskede længde, og træk den hen over bandagen, så den sidder glat og uden at stramme.

Hurtig og enkel fikseringsmetode

Mindre fnug og dermed mindre risiko for fibre i såret²




Den brede vifte af størrelser sikrer en omkostningseffektiv behandling, idet du minimerer spild

Den findes i 5 bredder med individuel farvekodning. Tubifast 2-Way Stretch er designet til anvendelse på forskellige kroppsdele uanset facon eller størrelse.


Tubifast 2-Way Stretch's lette, længdegående og breddegående elasticitet giver patienten bevægelsesfrihed og gør den mere bekvem at have på¹

Tubifast[®] 2-Way Stretch[®] var verdens første elastiske tubebandage, der kunne strækkes både i længden og i bredden¹. Denne unikke funktion giver patienten bevægelsesfrihed og er bekvem at have på. Ideel til fiksering af bandager og kompressionsbind eller som et beskyttelseslag mod skrøbelig hud. Tubifast 2-Way Stretch holder bandager sikkert på plads uden brug af tape, sikkerhedsnåle eller lignende. Den er hurtig og enkel at anvende, og der er mindre risiko for, at den fnugger² i forhold til de traditionelle tubebandager.


Sådan anvendes Tubifast® 2-Way Stretch®

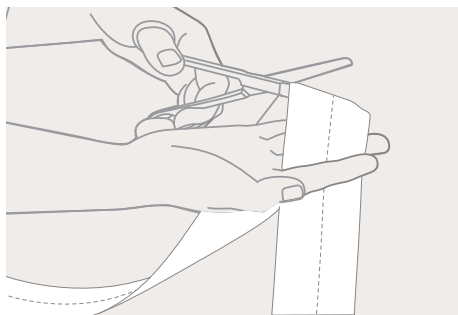

1. Vælg den rette tubebredde ved hjælp af farvetråden, og klip den til i den ønskede længde.

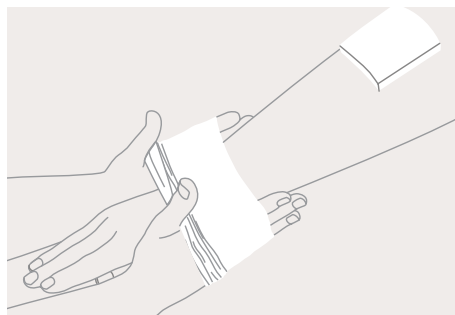

2. Træk Tubifast® 2-Way Stretch® hen over skadeområdet.

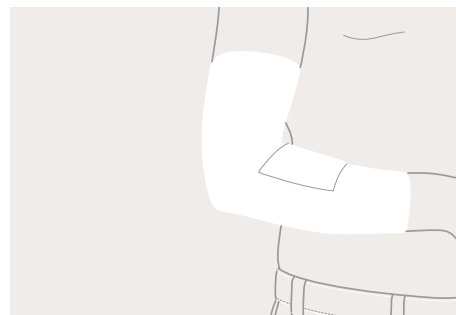

3. Placér Tubifast 2-Way Stretch, så den dækker bandagen. Se appliceringsguide for flere avancerede appliceringer.

Sådan virker Tubifast 2-Way Stretch

Tubifast 2-Way Stretch er fremstillet af viskose med meget fine tråde af elastan, der er strikket ind i stoffet horisontalt og vertikalt for at give det en let elasticitet.

Tubifast 2-Way Stretch holder bandager på plads uden at stramme. Sikkerhedsnåle og tape er ikke nødvendig. Dets 2-Way Stretch giver patienter fuld bevægelsesfrihed og er bekvem at have på.

Tubifast 2-Way Stretch findes i fem forskellige bredder og er designet til at kunne anvendes på forskellige kroppsdele uanset form eller størrelse.

Hver bredde er markeret med en farvet tråd, som er strikket ind i tuben. Den er enkel at anvende. Klip den til i den ønskede længde, og træk den hen over bandagen, så den sidder glat og uden at stramme.

Fordele ved Tubifast 2-Way Stretch

- Tubifast 2-Way Stretch holder bandager på plads uden risiko for at stramme
- Dens vertikale og horisontale elasticitet giver patienten bevægelsesfrihed og gør den mere bekvem at have på¹
- Hurtig og enkel at anvende: Klip den til i den ønskede længde, og træk den hen over bandagen, så den sidder glat og uden at stramme
- Farvemarkeringen gør det let at identificere bredden, der spænder fra fiksering af små til store ekstremiteter
- Mindre fnug og dermed mindre risiko for fibre i såret²

Fiberindhold

Viskose, elastan og polyamid

Vaskeinstruktioner



Anvendelsesområder

Tubifast 2-Way Stretch kan anvendes til fiksering af bandager eller til at dække huden på hvilken som helst del af kroppen. Den kan også anvendes under gips.

På grund af dens tubefacon er Tubifast 2-Way Stretch særlig velegnet til at holde bandager på plads på vanskelige områder så som amputationsstumper.

Tubifast 2-Way Stretch sortiment

Produkt	Bredde x Længde	Omkreds	Varenr.	Stk/in-derkr.	Stk/trp.kr
RØD Små ekstremiteter	3,5cm x 1m	9-18cm	2480	12	36
	3,5cm x 10m	9-18cm	2434	1	20
GRØN Små- og mellemstore ekstremiteter	5cm x 1m	14-24cm	2481	12	36
	5cm x 10m	14-24cm	2436	1	24
BLÅ Store ekstremiteter	7,5cm x 1m	24-40cm	2482	12	36
	7,5cm x 10m	24-40cm	2438	1	30
GUL Ekstra store ekstremiteter, hoved, helkrop til børn	10,75cm x 1m	35-64cm	2483	12	36
	10,75cm x 10m	35-64cm	2440	1	12
LILLA Stor helkrop, voksne	20cm x 1m	64-130cm	2479	12	48
	20cm x 10m	64-130cm	2444	1	15

Tubifast 2-Way Stretch er pakket i enkeltpakning

Ingen naturgummilætex hverken i produktet eller pakningen.

Referencer:

1. Published data shows that Tubifast 2-Way Stretch exceeds the minimum requirement of longitudinal stretch for the actions of sitting, bending and flexing. Physical testing of textiles, B. P. Saville, Woodhead Publishing, 1999.
2. Data on file – Fibre Survey carried out on behalf of Mölnlycke Health Care Limited, May 2009.

Læs mere på www.molnlycke.dk

Mölnlycke Health Care ApS, Tlf + 45 48 168 268, info.dk@molnlycke.com. Mölnlycke og Tubifast varemærker, navne og logoer er registreret globalt til en eller flere af virksomhederne i Mölnlycke Health Care gruppen. © 2018 Mölnlycke Health Care AB. Alle rettigheder forbeholdes. DKWC0261808

Mölnlycke®