

Tehokas imukykyinen vahtosidos

Polyuretaanivahto

- Imee haavaeritettä
- Toimii hyvin kompression alla
- Mukautuu kehon muotoihin
- Miellyttävä

Polyuretaaninen taustakalvo

- Hengittävä
- Vedenpitävä
- Virus ja bakteerisuoja*



Safetac® teknologia


- Ei vaurioita haavaa eikä ympäröivää ihoa sidosta poistettaessa¹
- Ei kiinnity kosteaan haavapintaan, vaan kuivaan haavaa ympäröivään ihoon²
- Sulkee haavan reuna-alueet haavaeritteeltä ja vähentään näin maseraation riskiä³
- Mukautuu ihon muotoihin



* mikrobit, jotka ovat suurempia kuin 25nm

- Ei vaurioita haavaa eikä ympäröivää ihoa sidosta poistettaessa^{1,2}
- Tehokas imukyky
- Toimii kompression alla
- Vähentää maseraation riskiä³


Mepilex® -sidoksen käyttö

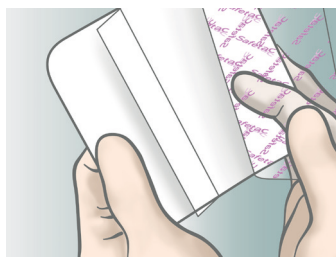

Puhdista haava ja ympäröivä alue.
Poista sidoksen taustakalvo.



Mepilex tulee asettaa vähintään 2cm haavaalueen yläpuolelle iholle. Aseta kiinnittyvä pinta haavaa vasten. Älä venytä sidosta paikalleen asettaessa.

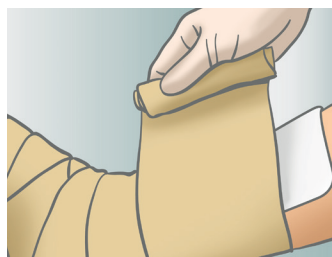

Kiinnitä Mepilex sekundäärisellä sidoksella esim. Tubifast 2-way Stretch.

Mikä on Safetac teknologia?

Safetac on ainutlaatuinen silikonikiinnitysteknologia. Safetac-teknologiaan perustuvat sidokset eivät aiheuta vaurioita poistettaessa. Sidoksen vähentävät vaurioita haavalle ja sitä ympäröivälle iholle sekä vähentävät potilaalle aiheutuvaa kipua.

Mepilexin edut

- Ei vaurioita haavaa eikä ympäröivää ihoa sidosta poistettaessa
- Voidaan jättää paikoilleen useiksi päiviksi haavan kunnon mukaan
- Vähentää maseraation riskiä
- Parantaa potilasmukavuutta
- Voidaan käyttää kompression alla
- Voidaan irrottaa ja kiinnittää uudelleen menettämättä kiinnittymisominaisuuksia
- Voidaan leikata sopivan kokoiseksi
- Alhainen iho- tai allergisen reaktion riski

Mepilex on steriilisti yksittäispakattu

Tuotenro.	Koko cm	Kpl/osastopak.	Kpl/kuljetuspakk.
294015	5 x 5	5	40
294100	10 x 10	5	70
294200	10 x 20	5	45
294300	15 x 15	5	25
294400	20 x 20	5	20
294500	20 x 50	2	12
Mepilex Heel			
288100	13 x 20	5	25
288300	15 x 22	5	30

Käyttöalueet

Mepilex soveltuu monenlaisille vähän tai kohtalaisesti erittävillä haavoilla kuten: sääri- ja jalkahaavat, painehaavat ja traumaattiset haavat, esim. ihon repeämät.

HUOMIO

Jos haavassa esiintyy kliinisiä merkkejä infektiosta, niin Mepilex -sidoksen käyttöä voidaan jatkaa, jos asianmukainen infektiohoito on aloitettu.



Vitteet: 1. White R., A Multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK 2008; Vol 4, No 1. 2. Dykes PJ et al. Effects of adhesive dressings on the stratum corneum of the skin. J Wound Care 2001; 10(2):7-10. 3. Dykes PJ. The effect of adhesive dressing edges on cutaneous irritancy and skin barrier function. J Wound Care 2007; 16(3):97-100.

Lisätietoa www.molnlycke.fi

Mölnlycke Health Care Oy, Pitäjänmäentie 14, 3 krs, 00380 Helsinki, Puh +358 (0)201 622 300
Mölnlycke, Mepilex ja Safetac nimet ja logot ovat yhdelle tai useammalle Mölnlycke Health Care Group -konsernin yritykselle globaalisti rekisteröityjä tavaramerkkejä. ©2018. Mölnlycke Health Care Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. FIWC0401805

