

Troakarer


Truly customized laparoscopic solutions




Ett brett sortiment av ergonomiskt utformade troakarer, vilket ger enkel och säker åtkomst till bukhålan.

- Transparent, räfflad troakarhylsa för instrumentvisualisering och effektiv fixering i bukväggen
- Universalmembran för 5–12mm instrument* samtidigt som pneumoperitoneum bibehålls


* Gäller troakarer med 12mm diameter

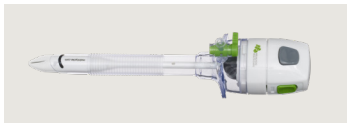


Skärande troakar.

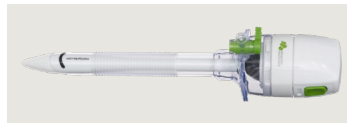


Bladeless troakar.

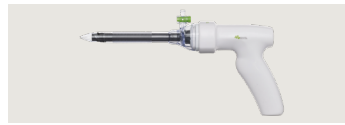

Optisk troakar – pistolgrepp.

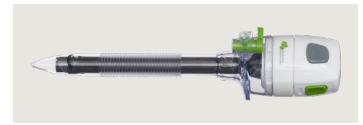


Optisk troakar.

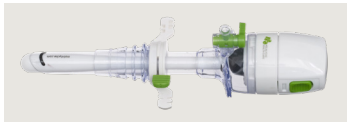


Hasson troakar.



Universalhylsa för troakar.

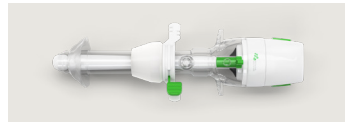

Hasson troakar med ballong.

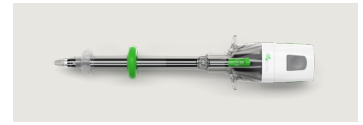

Optisk troakar med ballong.

Skärande troakar

Utrustad med ett vasst, rakt blad och en enkel och intuitiv skyddsmekanism som förhindrar oavsiktlig vävnadsskada, i synnerhet vid "blind" primärportsplacering.

- Vasst, rakt blad som tillåter låg införingskraft och minskad skada i fascian
- Reducerad bladbredd minimerar laceration (sönderslitning) och optimerar vävnadsdilatationen

Bladeless troakar

Designad för att separera i stället för att skära i vävnaden, vilket ger minskad skada i fascian jämfört med skärande troakar. Detta resulterar i minskat behov av fasciärförslutning.

- Minimerar skadan i porthålet och underlättar snabb läkning
- Minskad frekvens av porthålsbräck

Optisk troakar

Optisk troakar ger direkt visualisering av skikten i bukväggen vid införande av troakar, vilket minskar risken för troakarrelaterade skador, i synnerhet vid primär portplacering.

- Säker ingång till bukhålan
- Dilaterande spets minimerar skada på portstället och risken för postoperativ bräckbildning

Art. Nr.	Beskrivning	Stlk	Längd	Avd Fp
899300	Skärande troakar	5 mm	70 mm	5
899301	Skärande troakar	5 mm	100 mm	5
899302	Skärande troakar	11 mm	100 mm	5
899303	Skärande troakar	11 mm	150 mm	5
899304	Skärande troakar	12 mm	100 mm	5
899305	Skärande troakar	12 mm	150 mm	5
899308	Bladeless troakar	5 mm	70 mm	5
899309	Bladeless troakar	5 mm	100 mm	5
899310	Bladeless troakar	11 mm	100 mm	5
899311	Bladeless troakar	11 mm	150 mm	5
899312	Bladeless troakar	12 mm	100 mm	5
899313	Bladeless troakar	12 mm	150 mm	5
899314	Optisk troakar – pistolgrepp	11 mm	100 mm	5
899315	Optisk troakar – pistolgrepp	12 mm	100 mm	5
899316	Optisk troakar	5 mm	70 mm	5
899317	Optisk troakar	5 mm	100 mm	5

Hasson troakar

Hasson troakarer är designade för kirurger som föredrar säkerheten med öppen portplacering.

- Design med trubbig obturator förhindrar oavsiktlig skada på inre organ under införing
- Hylsans längd kan snabbt justeras med den enkla och effektiva justerbara tätningkonen

Universalhylsa för troakar

Kompatibla med alla obturatorer av samma storlek (skärande, bladeless, optiska) vilket ger en optimal orderhantering, förvaring och kostnadsbesparing.

Troakarer med ballong

- Erbjuder atraumatisk fixering i bukväggen och motverkar att hylsan glider ut även vid längre operationer samt vid många instrumentbyten
- Minimalt exponerad hylsa i bukhålan som ökar det kirurgiska utrymmet med optimerad visibilitet medan gstryck bibehålls

Finns både som steril enstycksförpackning och för inkludering i Mölnlycke kundanpassade set.

Art. Nr.	Beskrivning	Stlk	Längd	Avd Fp
899324	Optisk troakar	5 mm	150 mm	5
899318	Optisk troakar	11 mm	100 mm	5
899325	Optisk troakar	11 mm	150 mm	5
899319	Optisk troakar	12 mm	100 mm	5
899326	Optisk troakar	12 mm	150 mm	5
899306	Hasson troakar	11 mm	100 mm	5
899307	Hasson troakar	12 mm	100 mm	5
899320	Universalhylsa för troakarer	5 mm	70 mm	5
899321	Universalhylsa för troakarer	5 mm	100 mm	5
899322	Universalhylsa för troakarer	11 mm	100 mm	5
899323	Universalhylsa för troakarer	12 mm	100 mm	5
899330	Optisk troakar med ballong	5 mm	70 mm	5
899327	Optisk troakar med ballong	5 mm	100 mm	5
899331	Optisk troakar med ballong	11 mm	100 mm	5
899328	Optisk troakar med ballong	12 mm	100 mm	5
899329	Hasson troakar med ballong	12 mm	100 mm	5

Läs mer på www.molnlycke.se